

# **KLASER®**

## **CUBE Plus 30**

Leader en Laser de Physiothérapie




# Renforcez votre Rétablissement:

## La révolution de la rééducation au laser

Le CUBE Plus 30 High-Power Laser (HPL) est un dispositif remarquable permettant de définir une nouvelle référence en matière de thérapies de rééducation au laser. Grâce à la technologie HPL, cet outil offre des traitements rapides, indolores et non invasifs capables d'améliorer le rétablissement sans avoir recours à des médicaments. Il est particulièrement utile lors de la réhabilitation post-chirurgicale et des traitements thérapeutiques.

Le CUBE Plus 30 dispose d'une plage de fonctionnement à haute puissance, facilitant la délivrance efficace de photons, entraînant ainsi des durées de traitement plus courtes. En outre, il utilise simultanément plusieurs longueurs d'onde afin de garantir une absorption maximale dans les chromophores ciblés, accélérant ainsi la cicatrisation et le soulagement de la douleur dans les tissus mous et les articulations entraînant des effets photochimiques et photothermiques entraînant une réponse tissulaire diversifiée.

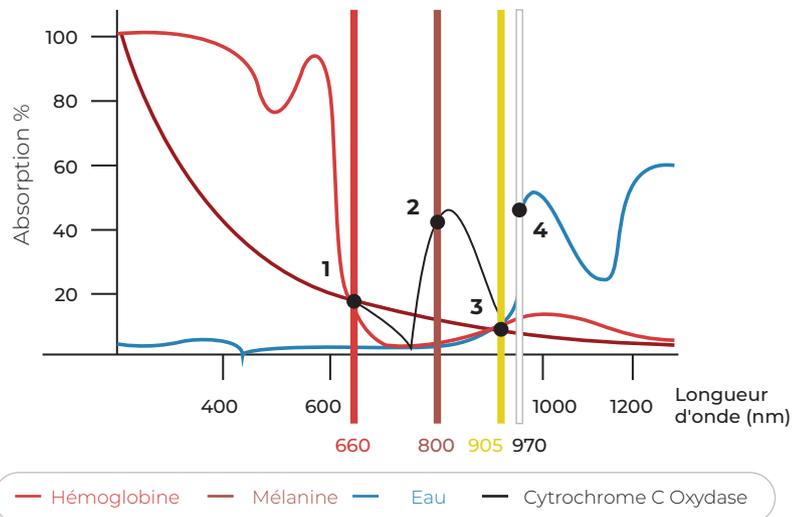

## Avantages de la Technologie CUBE Plus 30

Lésions musculo-squelettiques traitées par le dispositif :

- Fasciite plantaire
- Œdème et gonflement
- Entorses
- Fractures osseuses
- Bursites
- Déchirures musculaires
- Tendinite
- Arthrose du genou
- Entorses
- Méniscopepathie
- Épicondylite
- Hernie discale
- Canal carpien

Lésions cutanées:

- Ulcères
- Plaies
- Ulcères du pied diabétique
- Blessure

## Avantages du dispositif CUBE Plus 30

- Câble optique renforcé
- Renforcement de la puissance.
- Poignée intelligente: application de sécurité exceptionnelle
  - Capteur de mouvement
  - Contrôle de la température.
  - Contrôle de la vitesse
- La poignée avec la fonction APM (Active Photonics Modulations) permet d'affiner le traitement
- Les propriétés de résistance à la chaleur de la poignée témoignent de son rôle pionnier dans le domaine de la technologie des matériaux, en restant toujours froide. La nouvelle pièce distale se distingue par sa facilité d'entretien, de stérilisation et d'autolubrification
- Poignée multimode avec logiciel optique interchangeable

## Caractéristiques du Logiciel

- Thérapie Laser Dynamique.
- Nouvelle technologie :
  - Logiciel optimisé centré sur l'intérêt du thérapeute :
    - **Phases:** Accent sur les différentes étapes du processus thérapeutique.
    - **Effets:** : Accent sur les principaux bénéfices apportés par la longueur d'onde.
- Protocoles avec les paramètres de la thérapie inclus.
- Mises à jour périodique du logiciel.



## Accessoires

### Extend plus

Thérapie sur des zones étendues

### Facultative

- La dernière génération K-Laser a conçu la nouvelle technologie K-Laser Cube Extend, qui peut être combinée avec la thérapie K-Laser afin de traiter plus facilement les zones étendues, pour de meilleurs résultats que ceux avec un scanner laser.
- Le K-Laser Cube Extend Plus est équipé d'un bras articulé et d'un bras pivotant et d'une tête amovible avec une place pour le faisceau laser. Grâce à son cône d'émission plus large, il traite de plus grandes surfaces.
- Le K-Laser Cube Extend Plus, d'un diamètre de 100 mm, a un design unique et exclusif : il est ergonomique et facile à positionner, équipé d'une optique spéciale qui délivre l'énergie uniformément sur toute la zone à traiter.
- Le K-Laser Cube Extend Plus exploite toutes les longueurs d'onde disponibles. Grâce à sa large gamme de traitements, il peut également être utilisé sur des plaies importantes ainsi que traiter de plus grandes surfaces.
- Le K-Laser Cube Extend Plus est disponible pour toutes les séries K-Laser Cube.

## Spécifications Techniques

Intense Super Pulse (ISP) 30 W

Onde continue (CW) 25 W

4 longueurs d'onde: 970 nm, 905 nm, 800 nm, 660 nm

Poignée distale Activ Photonics Modulation - APM

1,5 kg - ultra-portable

Batterie rechargeable

Batterie nano-phosphate de qualité supérieure et de longue durée

Dimensions: 200 x 180 x 190 mm



**INDIBA®**  
revitalizing lives

C / Moianès, 13 Pol. Ind. Can Casablanques  
08192 Sant Quirze del Vallès  
Barcelona - Spain  
Tel. +34 93 265 55 22

**KLASER®**

Eltech K-Laser s.r.l. Strada Castagnole 20/H  
31100 Treviso Italy PI 03639840267  
Tel. +39 0422 210430  
www.k-laser.com

[www.indiba.com](http://www.indiba.com)



Les dispositifs sont conformes à la législation en vigueur sur les dispositifs médicaux.  
Matériel exclusivement destiné à un usage professionnel.

MK014\_FRA